



## El "pack terapéutico global" Twicare®

### Indicaciones

- Su principal indicación terapéutica es de tipo **ortopédico funcional** para el tratamiento de las clases II y III esqueléticas
- El Twicare® Twicare tiene una **acción ortodóntica funcional**:
  - ▶ Básicamente interceptiva: estimulación, orientación, eliminación de obstáculos, liberación de la oclusión
  - ▶ Alteraciones alveolares: retroalveolia o proalveolia incisiva, mordida cruzada anterior
  - ▶ Armonización en sentido vertical: cierre de oclusión abierta, reducción de mordida profunda
  - ▶ Alteraciones de la cinética mandibular
- El Twicare® es **perfectamente compatible con los aparatos correctores fijos**:
  - ▶ Complementa o potencia sus efectos al tiempo que desarrolla sus propias funcionalidades
  - ▶ Permite tratar, de manera global y en una sola fase, el equilibrio morfológico y funcional logrado después del tratamiento activo, garantizando su estabilidad y duración
- El Twicare® tiene un **ligero efecto ortodóntico mecánico**:
  - ▶ **Acción eumórfica**: junto con su acción ortopédica y ortodóntica, produce una realineación global espontánea que da un plus de motivación
- Las propias de las **férulas dobles** en general:
  - ▶ Contención temporal para la estabilización del resultado ortopédico, prevención de recidivas (intercepción) debidas a un impulso de crecimiento desfavorable
  - ▶ Contención en la clase II y, sobre todo, en la clase III esquelética con ocasión del crecimiento acelerado prepubescente
  - ▶ Mantenimiento del resultado alveolodental durante la transición de una dentadura mixta a una definitiva para garantizar la permanencia del resultado ortodóntico funcional y de la prealineación
  - ▶ Conservación de un resultado provisional o definitivo
  - ▶ Regulación en el sentido transversal
  - ▶ Orientación de los dientes en crecimiento
  - ▶ Aspectos múltiples de la terapia interceptiva
  - ▶ Etc.

### Contraindicaciones

- Pacientes con antecedentes de disfunciones temporomandibulares.
- Alergia conocida a uno de sus componentes.
- Pacientes que presenten episodios nocturnos de bruxismo severo.

## El Twicare® marca la diferencia

### Propulsor y retropulsor bimaxilar

- **Uso básicamente nocturno**
- **Premoldeado** de adaptación inmediata
- **Flexible** y cómodo
- Propulsión y retropulsión **ajustables, se activa fácil y rápidamente en la consulta**
- **Trazable**
- **Esterilizable**
- Adaptado a:
  - ▶ Respiración bucal ocasional
  - ▶ Dentadura mixta inestable
  - ▶ Aparato corrector fijo
- Beneficios:
  - ▶ **Para el paciente**: comodidad, uso nocturno y resultados tangibles y alentadores en poco tiempo
  - ▶ **Para el profesional**: ahorro de instrumental, tiempo y trabajo
  - ▶ **Para el auxiliar**: máxima simplificación de las tareas de gestión del material

**Medventiv™**  
 inventing for health  
[www.twicare.com](http://www.twicare.com)



El Twicare® es un dispositivo médico de clase I de uso individual diseñado y fabricado en Francia por Medventiv™. Este dispositivo está sujeto a la normativa sanitaria, cuenta con la correspondiente certificación CE desde 2011 y consta en el registro de la FDA estadounidense desde 2012.



**twicare®**  
 active multifunctional orthosis

**BRETAGNE®**



**CE FDA cleared**

Photos credits: Nagati creative production | Landeau création | Thinkstock@michaejung | Thinkstock@Stockbyte | Thinkstock@andres | Matton@samswards - Non-contractual information and photos may be changed without notice - File number 14/0027

Original y único: ¡una innovación especialmente diseñada para usted!

**Dispositivo extraíble, flexible, ajustable y de acción ortopédica y ortodóntica ideal para las clases II y III**

Desarrollado con la última tecnología, el Twicare® ofrece una amplia gama de aplicaciones para todas las edades y todos los tipos de dentadura:

**Premoldeado ideal con tecnología CAD/CAM  
¡Doblemente genial!**

El Twicare® está pensado para ofrecer mayor eficiencia al profesional.

Su tecnología innovadora y patentada respeta la anatomía dental, ofrece un alto grado de comodidad al paciente y garantiza la total inocuidad de sus componentes.



1 modelo con 10 tallas distintas identificadas por colores




**Selección del Twicare®**

Serie	Talla	Distancia por la cara distal entre los incisivos laterales superiores izquierdo y derecho	Anchura intermolar por la cara distovestibular de los primeros molares superiores
S	S1	26 mm	45 mm
	S2	27	47
	S3	28	50
	S4	29	52
M	M1	31	54
	M2	32	57
	M3	33	58
L	L1	34	60
	L2	36	63
	L3	37	65

**Dientes anteriores alineados:** medición con la regleta de un único uso que se suministra

**Dientes anteriores no alineados:** medición con una regla o calibrador

**Ajuste de las relaciones anteroposteriores**

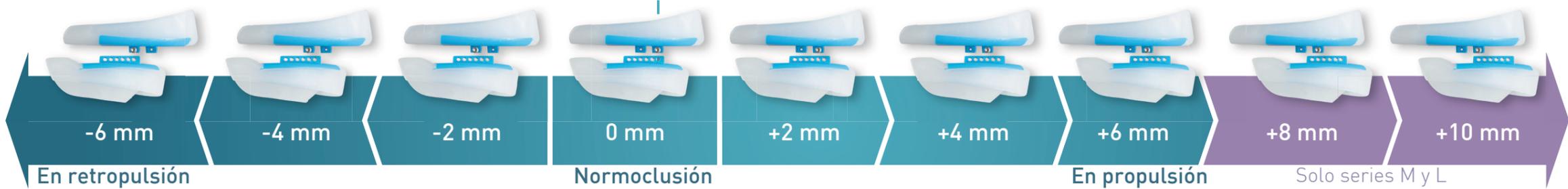

**Ventajas:**



- 1• Sistema de ajuste de las relaciones anteroposteriores.
- 2• Plano sobreelevado adaptado para mantener el reposo mandibular.
- 3• Ausencia de marcas molares y premolares para facilitar un desarrollo sin obstáculos.
- 4• Amplia abertura anterior para evitar la sensación de ahogo, especialmente en casos de respiración bucal.
- 5• Dispositivo ligero con la flexibilidad y la delgadez del elastómero.



**¡NUEVO!**

**Twicare® + aparato corrector fijo: ¡una combinación perfecta!**