

Nueva colección de Polvo para la Profilaxis KaVo

¡NUEVO!

ASÍ LA PROFILAXIS ES UN PLACER

Original de KaVo.
10 años
PROPHYpearls



KaVo. Dental Excellence.

KaVo PROPHYpearls® – gracias a las bolitas todo sale redondo.

Eficacia probada desde hace 10 años.

Las KaVo PROPHYpearls poseen forma esférica y, por ello, cuentan con un óptimo rendimiento de limpieza: la superficie redonda ofrece un mayor número de puntos de contacto que el polvo habitual por lo que trabajan con mayor eficiencia. Además, son especialmente respetuosas con los dientes al no disponer de bordes afilados. El tratamiento es muy agradable para el paciente. Las PROPHYpearls de KaVo existen en los sabores frescos de grosella, menta, naranja, melocotón y neutro.

- Las KaVo PROPHYpearls son multiuso: Para la eliminación de alteraciones cromáticas, placa y biofilm
- Para la limpieza dental antes del sellado de fisuras
- Para la limpieza dental antes del blanqueo
- Para la aplicación en protodoncia y ortodoncia



KaVo PROPHYpearls sin esquinas ni aristas. (tamaño de grano 60–70 µm).



La limpieza con KaVo PROPHYpearls es efectiva y respeta el material a tratar. (aumentado 150 veces)



Las PROPHYpearls de KaVo se desplazan sobre el diente con una infinidad de puntos de contacto gracias a su superficie redonda trabajando de forma más eficiente.



PROPHYpearls de KaVo y PROPHY Superpearls de KaVo: ángulo de trabajo de 10° a 60°. Debido al ángulo plano, las KaVo PROPHYpearls ruedan con una multitud de puntos de contacto por el diente desarrollando, así, su plena eficacia.

Un limpieza más respetuosa con PROPHYpearls®.

Perfecto en forma y función:

Las PROPHYpearls se basan en calcio, libre de grumos, y siempre están disponibles para utilizarse. Tienen una forma esférica y cuentan, por ello, con una capacidad óptima de limpieza: con una infinidad de puntos de contacto de las superficies redondas, las PROPHYpearls ruedan sobre el diente y trabajan de manera aún más eficiente.

Sencillamente para sus pacientes resulta más agradable:

Las PROPHYpearls son especialmente suaves con los dientes porque carecen de bordes afilados. Y como la limpieza de los dientes con PROPHYpearls también respeta el entorno de los dientes, sus pacientes lo encontrarán muy cómodo. Además, muchos pacientes valoran el sabor neutral de las perlas.

Ahorre un tiempo valioso con las PROPHYpearls:

Con PROPHYpearls no solamente le resultará eficiente la limpieza de los dientes, sino también su manipulación. Simplemente rellene las perlas con las barras de dosificación preparadas o con las nuevas botellas.

Tolerancia científicamente probada:

El instituto de medicina laboral, social y medioambiental de Ulm confirma que: "No se ha encontrado evidencia alguna que las PROPHYpearls dejen marcas de arañazos ni ahondamientos sobre la dentina ni sobre la superficie del esmalte tratadas. En el caso de las superficies esmaltadas tratadas, las estrias existentes no se alisaron de manera apreciable." Encontrará más información en: www.kavo.com/studien

PEARLS



Perlas redondas, resultado redondo.

Las KaVo PROPHYpearls –
El producto KaVo Original para la perfecta y cómoda limpieza de los dientes.
Ahora con nuevos sabores.

- Limpieza exhaustiva y respetuosa gracias a la perfecta forma esférica
- Seguro y biocompatible debido a la base de carbonato cálcico
- notable comodidad para sus pacientes
- Aplicación sencilla y eficiente
- Flexible con los sabores menta, melocotón naranja y grosella

¡Así la profilaxis se convierte en un placer!

KaVo PROPHYpearls – Resumen de todas las ventajas

- Aumenta el valor del pH, reduce la acidez y tiene un efecto positivo sobre la flora bucal
- Cuida la encía gracias a la tecnología de microesferas
- Diferentes sabores afrutados y agradables: naranja, menta, melocotón y grosella



¡NUEVO!





Profilaxis profesional con KaVo – única, polifacética y exclusiva.

collection

Así la profilaxis es un placer.

Cada vez más pacientes reconocen la importancia de someterse regularmente a una profilaxis para mantener una boca sana y una sonrisa radiante. Y para ello esperan que el tratamiento sea delicado y agradable. KaVo, como productor global para soluciones profesionales de profilaxis, le apoya con la calidad de primera categoría en su oferta de profilaxis.

Todas las soluciones de KaVo para profilaxis se destacan por:

- Aplicación sencilla
- Tratamiento agradable para sus pacientes
- Óptima integración en su proceso de trabajo

Profilaxis con KaVo – Sencillo para Usted y agradable para sus pacientes.



10 años KaVo PROPHYpearls – ahora con muchos más sabores refrescantes.

Desde hace 10 años, las KaVo PROPHYpearls vienen proporcionando una limpieza fiable y respetuosa. Las perlas convencen, sobre todo, por su superficie lisa. Esta permite una limpieza de los dientes efectiva y respetuosa. Ahora, hemos mejorado, aún más, las KaVo PROPHYpearls y podemos ofrecerle las mejores KaVo PROPHYpearls que existen y, además, en varios sabores deliciosos.

Ya sea supragingival o sub- gingival – KaVo siempre le brinda la solución óptima

Para un tratamiento subgingival profundo y suave le ofrecemos el polvo KaVo PROPHYflex Perio. Este polvo fino de glicina es muy suave para la encía y por esto es particularmente apto para tratamientos de periodontitis y de periimplantitis.

La gama de Polvos para la Profilaxis KaVo resulta óptima para múltiples aplicaciones:

- Para la eliminación de alteraciones cromáticas, placa y biofilm
- Para la limpieza dental antes del sellado de fisuras
- Para la limpieza dental antes del blanqueo
- Para la aplicación en prostodoncia y ortodoncia
- Para la limpieza subgingival y la prevención de periodontitis y de periimplantitis



Colección Polvo de Profilaxis KaVo – Resumen de todas las ventajas

- Innovador surtido de polvos con nuevos sabores
- Para una aplicación supra y subgingival
- Exclusividad: las nuevas KaVo PROPHYpearls naranja, melocotón, menta y grosella



El clásico con bicarbonato de sodio – limpieza garantizada.

El polvo KaVo PROPHYflex consiste en polvo de bicarbonato de sodio con un tamaño del grano de 60-70µ y es un elemento clásico entre las sustancias de limpieza. Elimine con ello el sarro de manera sencilla y efectiva y, a la vez, con un sabor a fruta. El KaVo Polvo PROPHYflex existe en los sabores cereza, mora, menta y naranja.


KaVo Polvo PROPHYflex® Perio – Limpieza en profundidad.

Periodontitis y periimplantitis – Tratamiento eficaz.

Tenga resultados de trabajo minuciosos y a la vez muy cuidadosos incluso en la aplicación subgingival gracias al polvo KaVo PROPHYflex Perio. De esta forma Usted tratará la periodontitis y la periimplantitis de manera eficaz y a largo plazo.

Cuide la encía de la mejor forma: gracias al polvo fino de glicina, el tratamiento será mucho más agradable y suave para sus pacientes que trabajando con curetas dentales.

El uso y la manipulación de KaVo PROPHYflex Perio Powders también es fácil y flexible – se puede utilizar con KaVo PROPHYflex 3 2018 o con otros aparatos comerciales de chorreado de polvo.

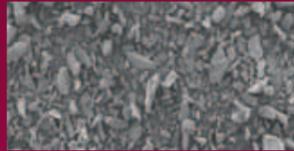

El polvo KaVo PROPHYflex con una granulación extra fina es biodegradable (tamaño de grano 18–22 µm).

Polvo KaVo PROPHYflex Perio – Resumen de todas las ventajas

- Minucioso: limpieza completa y eficaz de las bolsas tras la eliminación del biofilm (periodontitis-periimplantitis), reducción de gérmenes y disminución de la profundidad de las bolsas periodontales
- Suave: polvo más fino (18–22 µm), glicina (sustancia activa de base), menos abrasivo y de sabor neutro
- Rentable: KaVo PROPHYflex Perio Powder puede utilizarse con cualquier equipo comercial de chorreado de polvo; a práctica botella de reserva es ideal para múltiples aplicaciones.

PERIO



Polvo KaVo PROPHYflex® – Limpieza con sabor a fruta.

Sencillo y flexible para diversas indicaciones.

Con el polvo KaVo PROPHYflex limpiará las fisuras antes de realizar el sellado de manera especialmente respetuosa. Para prevenir la aparición de caries o gingivitis, podrá eliminar la placa dental, la película biológica y las decoloraciones con total sencillez y efectividad. El polvo KaVo PROPHYflex resulta perfecto para utilizar con prótesis estéticas, para adaptarse al color de los dientes sanos con puentes, inlays o coronas así como para utilizar antes del blanqueado.



Antes de la limpieza.



Después de la limpieza con el PROPHYflex.

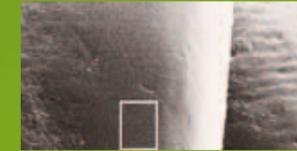


Imagen microscópica después de la limpieza con PROPHYflex 3 (aumentada 20 y 200 veces).



Bicarbonato de sodio común: ángulo de trabajo de 60° a 90°. Las partículas puntiagudas del polvo de limpieza entran en contacto con el diente de forma perpendicular y salen expulsadas rápidamente luego de un único impacto.

El polvo KaVo PROPHYflex acierta con el gusto de sus pacientes.

Tenga en cuenta los gustos individuales de sus pacientes. Los diferentes sabores a cereza, mora, menta y naranja del polvo KaVo PROPHYflex le ayudan de forma perfecta en esa labor. El polvo KaVo PROPHYflex consiste en polvo de bicarbonato de sodio con un tamaño del grano de 60–70µ. Así el sarro se elimina de forma muy sencilla y eficaz – y todo esto con un agradable sabor a fruta.



Polvo KaVo PROPHYflex – Resumen de todas las ventajas

- Minucioso y cuidadoso gracias a la finura del polvo
- Notablemente agradable para sus pacientes
- Aplicación sencilla y eficaz
- Flexible con los sabores naranja, mora, menta y cereza



PULVER



En resumen – así la profilaxis es un placer.

¡NUEVO!
¡NUEVO!
¡NUEVO!
¡NUEVO!
¡NUEVO!
¡NUEVO!

KaVo PROPHYpearls carbonato de calcio	Número de pedido
neutro 4 botellas x 250 g	1.010.1798
neutro 80 palillos x 15 g	1.010.1826
menta 80 palillos x 15 g	1.010.1828
melocotón 80 palillos x 15 g	1.010.1829
naranja 80 palillos x 15 g	1.010.1830
grosella negra 80 palillos x 15 g	1.010.1831
KaVo PROPHYflex Pulver Natriumbicarbonat	Número de pedido
KaVo Polvo PROPHYflex naranja 80 palillos x 15 g	1.007.0014
KaVo Polvo PROPHYflex mora 80 palillos x 15 g	1.007.0015
KaVo Polvo PROPHYflex cereza 80 palillos x 15 g	1.007.0016
KaVo Polvo PROPHYflex menta 80 palillos x 15 g	1.007.0017
KaVo Polvo PROPHYflex Perio (Glicina)	Número de pedido
KaVo Polvo PROPHYflex Perio 4 botellas x 100 g	1.009.3732



¡NUEVO!

PROPHYflex color	Número de pedido
KaVo PROPHYflex 3 2018 violeta	1.006.9926
KaVo PROPHYflex 3 2018 Sirona violeta	1.006.9927
KaVo PROPHYflex 3 2018 negro	1.000.4672
KaVo PROPHYflex 3 2018 Sirona negro	1.006.9920



KaVo. Dental Excellence.