


Adesivo Total Etch Proclinic Expert



O Adesivo Total Etch **Proclinic Expert** é um adesivo de 5.^a geração para utilização da técnica de ataque ácido com um só componente para esmalte e dentina.

FORÇA DE TENSÃO AO CISALHAMENTO

Graças à hibridização completa da dentina, consegue-se uma elevada resistência à adesão.

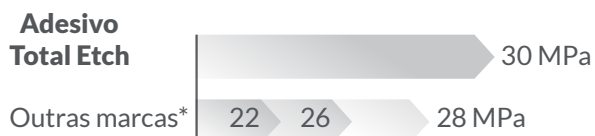


SEM BISGMA

Não contém BisGMA, o que elimina os efeitos desfavoráveis que esta produz.

SELAGEM TOTAL

Selagem total dos túbulos dentinários, minimizando assim a sensibilidade pós-operatória.

LIBERTAÇÃO DE FLÚOR

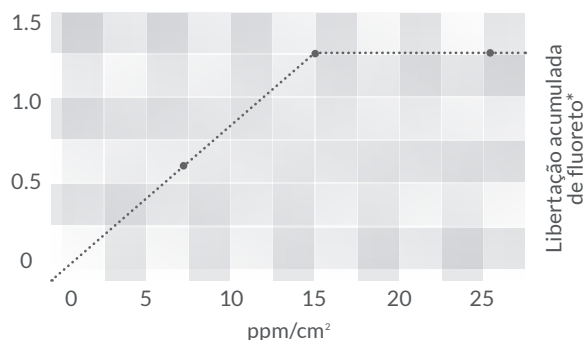

Dr. Carlos Gargallo
Clínica Carlos Gargallo
Número cert. profissional 3947

“Os adesivos Proclinic Expert estão completamente integrados na minha metodologia habitual de trabalho. Os adesivos são fáceis de aplicar, não gotejam nem deixam restos indesejáveis após a sua polimerização e apresentam um feedback muito positivo, sem sensibilidades pós-operatórias. São, sem dúvida, o complemento perfeito para os novos compósitos Proclinic Expert”


Adesivos Total Etch, 5 ml	36599
Adesivos Total Etch pack duplo, 2x5 ml	36598

Adesivo Self-Etch Proclinic Expert



O Adesivo Self-Etch **Proclinic Expert** é um sistema de ação muito rápida e de um só componente para dentina e esmalte, para as técnicas de ataque ácido seletivo e de auto-ataque ácido. Trata-se de um adesivo de 7.^a geração.

LIBERTAÇÃO DE FLÚOR

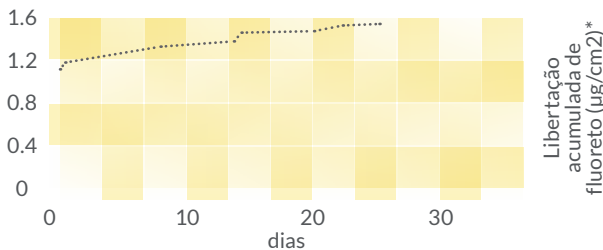

* Resultados de ensaio do fabricante em relação às três marcas de fabricante mais vendidas no mercado espanhol.

FORÇA DE TENSÃO AO CISALHAMENTO

Alta resistência à adesão, assegurando a permanência da restauração.

Adesivo Self-Etch
no esmalte*

27.7 MPa

Outras marcas
no esmalte*

21 22.9 25 MPa

Adesivo Self-Etch
na dentina*

35.2 MPa

Outras marcas
na dentina*

24 26 30 MPa

- Proporciona uma superfície final livre de resíduos aquosos, graças ao facto de conter 7% de revestimentos hidrofílicos e hidrofóbicos especialmente tratados.
- Não contém BisGMA nem HEMA, evitando assim possíveis irritações na pele.

- Película pouco espessa, o que facilita uma margem invisível entre a restauração e o dente.
- A sua alteração de cor com a fotopolimerização (de amarelo escuro a transparente) indica-lhe quando deve continuar para o passo seguinte.

Adesivo Self-Etch, 5 ml

36600